

# Mepilex® Border Ag

## TEHOKAS ANTIMIKROBINEN IMUKYKYINEN ALL-IN-ONE VAAHTOSIDOS

- Minimoi kipua ja traumaa sidosten vaihdon yhteydessä<sup>1,2,3</sup>
- Nopea ja pitkäkestoinen antimikrobinen teho<sup>5</sup>
- Erinomainen ja tehokas eritteiden hallinta
- Pitävä kiinnitys, mutta traumaton sidoksen poisto

### Polyuretaani taustakalvo

- Hengittävä
- Suihkunkestävä
- Virus- ja bakteerisuoja

### Monikerroksinen imukykyinen vaahtotyyny


- Tiivistetty hopeavaahto imee ja levittää haavaeritettä ja samalla vapauttaa hopeaa haavalle
- Kuitukerros mahdollistaa maksimaalisen eritteiden hallinnan

### Safetac®

- Vähentää kipua ja traumaa ennen sidosten vaihtoa, sen aikana ja sen jälkeen<sup>1</sup>
- Ei kiinnity kosteaan haavapintaan vaan kuivaan ihoon<sup>3</sup>
- Sulkee haavan reuna-alueen, vähentäen näin maseraation riskiä<sup>4</sup>

### Nopea ja pitkäkestoinen hopeaionien teho

- Antimikrobinen vaikutus 30 minuutissa, jopa 7 päivän ajan<sup>5</sup>

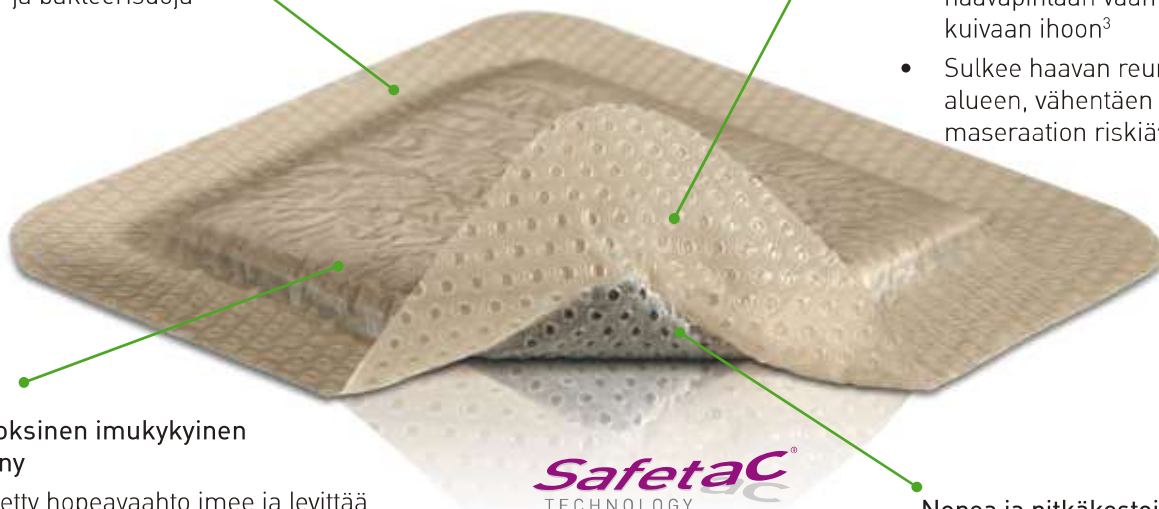


## Safetac® teknologia

### Safetac® teknologia. Vähemmän kipua ja traumaa.

Safetac on patentoitu kiinnitysteknologia joka minimoi kipua potilaalle ja traumaa haavalle. Safetac-teknologia on saatavilla Mölnlycke Health Caren haavanhoitosidoksissa, mm. Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® ja Mepitac®.

Lisätietoa [www.safetac.com](http://www.safetac.com)

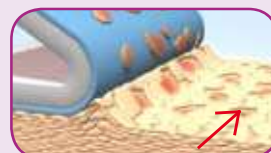


Perinteistä kiinnitysainetta käytettäessä esiintyy ihon kuoriutumista.




Safetac-teknologian tuotteita käytettäessä ei esiinny ihon kuoriutumista.

## Käyttöohje Mepilex® Border Ag

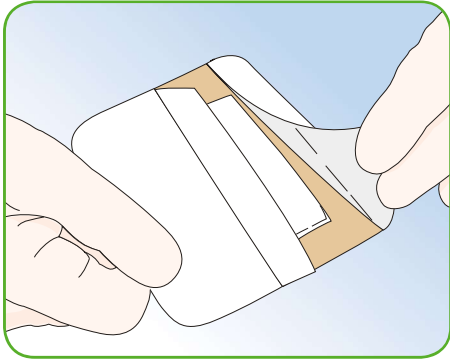

Puhdista haava. Poista sidoksen taustapaperi.

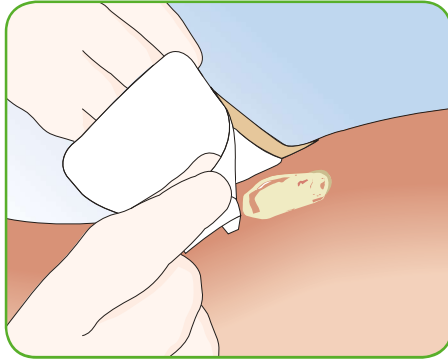

Aseta kiinnittyvä puoli haavalle, älä venytä sidosta sitä asettaessasi.

### Kuinka Mepilex Border Ag toimii

Mepilex Border Ag on antimikrobinen all-in-one vaahtosidos, joka tehokkaasti imee ja pidättää haavaeritteitä sekä ylläpitää kosteaa haavaympäristöä. Safetac-tekniikan ansiosta sidos vähentää maseraation riskiä sulkemalla haavan reuna-alueet, joten haavaerite ei vuoda ympäröivälle iholle. Safetac-tekniikka mahdollistaa sidoksen vaihtamisen vahingoittamatta haavaa tai ympäröivää ihoa ja aiheuttaen potilaalle vähemmän kipua.

Mepilex Border Ag tappaa haavaan liittyviä taudinaiheuttajia 30 minuutissa ja säilyttää tehonsa jopa 7 päivän ajan. Vähentämällä mikro-organismien määrää, Mepilex Border Ag vähentää myös haavaan liittyvää hajua.

### Mepilex Border Ag sidoksen etuja

- Minimoi kipua ja traumaa sidosten vaihdon yhteydessä
- Itsekiinnittyvä - Kiinnitystä ei tarvita
- Suihkunkestävä
- Voidaan käyttää kompressiosidosten alla
- Miellyttävä potilaalle käytön aikana
- Voidaan jättää paikoilleen usean päivän ajaksi haavan tilasta riippuen
- Sidos ei menetä kiinnittymistehoaan, vaikka haava tarkistettaisiin poistamatta sidosta kokonaan
- Vähäinen ihoärsytyksen tai allergian riski

### Käyttöalueet

Mepilex Border Ag on suunniteltu kohtalaisesti tai runsaasti erittäville haavoille, kuten jalka- ja säärihaavat, painehaavat, syöpähaavat, toisen asteen palovammat, traumaattiset ja kirurgiset haavat, joissa tarvitaan kosteaa haavaympäristöä, eritteiden hallintaa, hellää kiinnittymistä ja antimikrobista tehoa.

Yksityiskohtaisempaa tietoa löydät pakkauksen käyttöohjeista.



### MEPILEX BORDER AG VALIKOIMA (steriilisti yksittäispakattu)

Tuotenro	Koko cm	Kpl/osastopak.	Kpl/kuljetuspakk.
395200	7,5 x 7,5	5	70
395300	10 x 10	5	50
395400	15 x 15	5	50
395600	15 x 20	5	45
395800	10 x 20	5	35
395700	10 x 25	5	35
395900	10 x 30	5	25
Mepilex Border Sacrum Ag			
382000	18 x 18	5	40
382200	20 x 20	5	40
382400	23 x 23	5	25